

ePat[®]lite

inkl. Wandhalterung

77 0370 00, 77 0370 10



Allgemeine Beschreibung

Kombiniertes Kommunikations- und Bediengerät mit Gegensprechtechnik zum Einsatz am Patientenbett als Teil einer Rufanlage gemäß DIN VDE 0834.

Die abgesetzte, beleuchtete, klar erkennbare Ruf-taste ermöglicht jederzeit eine sichere Rufauslösung.

Komfortfunktionen werden über eine touchsensitive Oberfläche gesteuert. Als Komfortfunktionen sind das Schalten und Dimmen von zwei Lichtquellen, TV-Steuerung und -Tonübertragung, ELA-Übertragung sowie Jalousiesteuerung integriert. Die zusätzliche Servicerruftaste ermöglicht die Anforderung von nicht pflegerischen Dienstleistungen.

Durch die klare Anordnung und eindeutigen Symbole der Bedienelemente ist eine sichere Bedienung, besonders in Notsituationen, gewährleistet.

Hohe Sprachqualität für offenes und diskretes Sprechen zwischen Patient und Pflegepersonal.

Ausstattung und Funktionen


- Ergonomisch geformtes Gehäuse, besonders für Patienten mit motorischen Einschränkungen geeignet
- Intuitive Bedienung durch einfache, verständliche Symbole
- Exzellente Sprachqualität, hochwertiges Mikrofon und hochwertiger Lautsprecher
- Lautsprecher-Lautstärke kann während der Sprechverbindung angepasst werden
- Rote Ruftaste mit Beruhigungslicht und integriertem Findelicht
- Lichttaste für Leselicht mit Findelicht
- Lichttaste für Raumlicht
- Ton-Übertragung (TV/ELA) wahlweise
- 2 Tasten zur Lautstärkeregelung von TV/ELA
- Taste zum Ein-/Ausschalten von TV, Statusanzeige
- Taste zum Ein-/Ausschalten von ELA und Einschalten von Jalousie-Betrieb, Statusanzeige
- 2 Tasten zur Programmwahl TV/ELA und Herunter-/Herauffahren der Jalousie
- Servicerruftaste zum Anfordern von Service- bzw. Dienstleistungen (entsprechende Organisation auf der Station bzw. im Krankenhaus vorausgesetzt, weitere Hardware- und Software-Komponenten erforderlich)
- CLEAN-Taste zur Sperrung der touchsensitiven Bedienoberfläche während der Reinigung im Betrieb
- 1 Kopfhörerbuchse (3,5 mm Klinke) zum Anschluss eines handelsüblichen Kopfhörers (32 Ohm)
- Ca. 2,5 m lange Anschlussleitung
- 77 0370 10: Anschlussleitung mit Magnetstecker
- 77 0370 00: Anschlussleitung mit 13-poligem DIN-Stecker
- Halterung zur Aufnahme des ePat[®]lite
- Bedienoberfläche mit antibakterieller Wirkung
- Feuchtigkeitsschutz zur einfachen Reinigung und Desinfektion (IP54)

ePat[®]lite

inkl. Wandhalterung

77 0370 00, 77 0370 10

- Seite 2 -

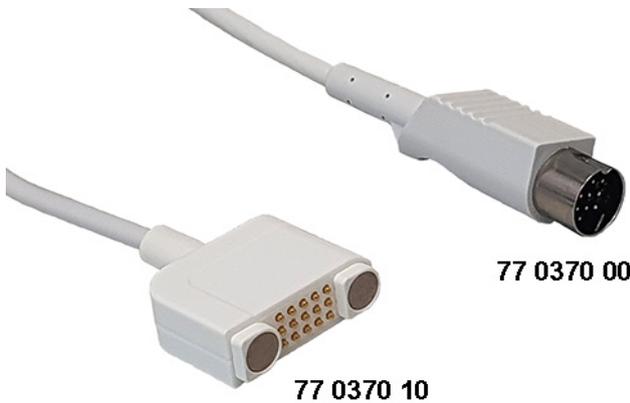

Systemvoraussetzungen

- 77 0370 10: Anschluss an Steckvorrichtung mit 13-poliger DIN-Buchse über Magnet-Adapter, Bestell-Nr. 77 0381 00 (separat bestellen!)
- 77 0370 00: Steckanschluss an Steckvorrichtung mit 13-poliger DIN-Buchse
- Geeignete Steckvorrichtungen: Steckvorrichtung Kombi, Bestell-Nr. 70 0425 00 oder 70 0424 00, oder Steckvorrichtung Kombi Kanal, Bestell-Nr. 70 0435 00 oder 70 0434 00
- TV-Steuerung in Verbindung mit RAN-Schnittstelle, Bestell-Nr. 77 0840 00
- Jalousiesteuerung in Verbindung mit RAN-Schnittstelle Universal, Bestell-Nr. 70 0848 00

Lieferumfang

- ePat[®]lite
- Halterung zur Aufnahme des ePat[®]lite
- Gebrauchsanweisung für Patienten
- Reinigungshinweise

ePat[®]lite

inkl. Wandhalterung

77 0370 00, 77 0370 10

- Seite 3 -



Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	173 x 65 x 27 mm
Stromversorgung:	24 V DC
Ruhestromaufnahme:	40 mA
Stromaufnahme bei ELA-Übertragung:	bis 100 mA
Standby-Leistungsaufnahme:	0,96 W
Leistungsaufnahme bei ELA-Übertragung:	bis 2,4 W
Gewicht inkl. Leitung:	ca. 190 g
Länge Anschlussleitung:	ca. 2,5 m
Farbe:	Weiß/schwarz
Materialien:	
- Ruftaste:	ASA/PC, TPE-S „Solplast“
- Gehäuseschale:	ASA/PC
- Halterung:	ASA/PC
- Bedienoberfläche:	ABS mit PET-Beschichtung mit antibakteriellen Eigenschaften
- Anschlussleitung:	Weich-PVC

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
77 0370 10	ePat [®] lite mit Magnetstecker	wie oben beschrieben
77 0370 00	ePat [®] lite mit DIN-Stecker	wie oben beschrieben
Erforderliches Zubehör, separat bestellen:		
77 0381 00	Magnet-Adapter für Steckvorrichtung 7004xx00	Erforderlich für 77 0370 10, siehe Anhang „Zubehör“!
Optionales Zubehör, bei Bedarf bestellen:		
70 0801 00	PBK-Kopfhörer	siehe Anhang „Zubehör“
77 0382 00	ePat [®] Clip	siehe Anhang „Zubehör“
Ersatzteile, bei Bedarf bestellen:		
77 0380 00	ePat [®] Halterung	siehe Anhang „Zubehör“

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>ePat® Halterung</p> <p>Halterung aus Kunststoff zur Aufbewahrung eines ePat®^{lite}. Als Wandhalterung oder zur Montage am Nachttisch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9016, Verkehrsweiß • Material: ASA/PC • Erforderliches Zubehör (nicht im Lieferumfang): 2 Schrauben, Gewinde M5, Trompetenkopf <p>Abmessungen (HxBxT): 110 x 69 x 33 mm</p>	77 0380 00	
<p>Magnet-Adapter für Steckvorrichtung 7004xx00 für 13-polige DIN-Buchse</p> <p>Adapter zum Anschluss eines ePat®^{lite} mit Magnetstecker, Bestell-Nr. 77 0370 10, in die 13-polige DIN-Buchse einer Steckvorrichtung, Bestell-Nr. 70 04xx 00. Flexible Verbindungsleitung zwischen Stecker und Buchse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15-polige Magnetbuchse • 13-poliger DIN-Stecker • 20 cm flexible Verbindungsleitung <p>Länge: ca. 28 cm, Gewicht: ca. 38 g</p>	77 0381 00	
<p>ePat® Clip</p> <p>Clip zur Befestigung an einem ePat®^{lite}, um dieses in eine PBK-Wandhalterung, Bestell-Nr. 70 0800 00, (vorzugsweise senkrechte Montage) oder eine PBK-Betthalterung Völker, Bestell-Nr. 70 0800 10, einzuhängen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: RAL 9016, Verkehrsweiß • Material: ASA/PC • Integrierte Metallplatte aus rostfreiem VA-Stahl zur Nutzung des Magneten in der PBK-Halterung 	77 0382 00	